

โทร : 080-831-4136 เพื่อรับการสาธิตการใช้งานได้ฟรี!
สาธิต ณ สถานที่ประกอบการของท่าน



117

หมวดสินค้า : Dressing Stick

แท่งออกไซด์สำหรับปรับแต่งระนาบหน้าแผ่น Aka-Magnet ที่ติดบนจานขัดอลูมิเนียม

แท่งออกไซด์สำหรับปรับแต่งระนาบหน้าแผ่นขัด Aka-Allegran และ Aka-Largan

แท่งออกไซด์สำหรับเปิดและปรับแต่งระนาบหน้าแผ่นขัด Aka-Piatto และ Aka-Piatto+

รายการสินค้าประจำปี 2023



ผลิตภัณฑ์ Akasel สามารถใช้งานกับเครื่องทุกผลิตภัณฑ์

Akasel

วัสดุในการเตรียมผิวชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ

Consumables for

โครงสร้างมหภาคและจุลภาค

Metallography

ชิ้นงานโลหะ, อโลหะ และ วัสดุอื่นๆ



บริษัท เทสติ้ง อินสตรูเมนต์ จำกัด

โทร : 080-831-4136, 095-380-1955 E-mail : instru@testinginstrument.com

Official line : @testinginstrument Website : www.testinginstrument.com



@testinginstrument



AKASEL.COM



Accessories



Product no.	Product name	Contents	GRWT kg
Dressing stick, for dressing of Aka-Piatto and Aka-Allegran			
75310101	Dressing Stick #220 10 x 25 x 100 mm	1 pc.	0.05
75310201	Dressing Stick #220 25 x 25 x 150 mm	1 pc.	0.19


Dressing Stick (เดรสซิ่ง สติค)

- สำหรับใช้ในการปรับแต่งผิวหน้าของจานขัดอลูมิเนียมที่ติดแผ่น **Aka-Magnet** (แผ่นเปลี่ยนจานขัดอลูมิเนียมเป็นจานขัดแบบแม่เหล็ก) เนื่องจากหลังใช้งานไปได้ระยะหนึ่งและตรวจสอบพบว่าหน้า **Aka-Magnet** ไม่ได้ระนาบ ต้องทำการปรับระนาบด้วย **Dressing Stick**
- สำหรับใช้ในการเปิดผิวหน้าแผ่นขัด **Aka-Piatto** และ **Aka-Piatto+** (แผ่นขัดแทนการใช้กระดาษทราย) ก่อนการใช้งานเพื่อให้แผ่นขัด **Aka-Piatto** และ **Aka-Piatto+** ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังใช้ในการปรับระนาบแผ่นขัด **Aka-Piatto** และ **Aka-Piatto+** หลังการใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง
- สำหรับใช้ปรับแต่งผิวหน้าแผ่นขัด **Aka-Allegran** และ **Aka-Largan** ให้ได้ระนาบหลังจากการใช้งานไประยะหนึ่ง




Aka-Magnet

อาคา-แมกเน็ต

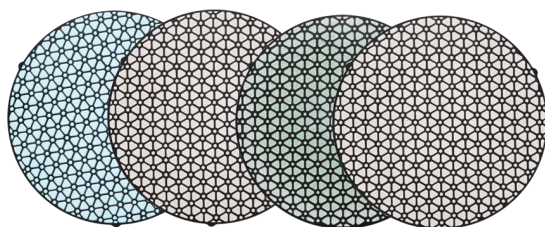

Aka-Allegran / Largan

อาคา-อัลลิกราน / อาคา-ลาร์กัน

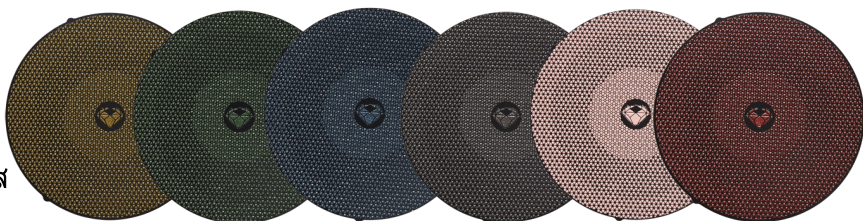

Aka-Piatto / Aka-Piatto+

อาคา-เพียโต และ อาคา-เพียโต พลัส